

## Dräger DrugTest® 5000 Analysesystem zum Nachweis von Drogen

Kein Pipettieren, kein Tropfen, kein Zeitstoppen:  
Mit dem Dräger DrugTest® 5000 ist nicht nur die Probenahme einfach und schnell erledigt. Sie können die Probe danach auch sofort automatisch auswerten lassen – für ein zuverlässiges Ergebnis an Ort und Stelle.



### PROBENAHE UND ANALYSE IN EINEM SYSTEM

Das Drogen-Analysesystem Dräger DrugTest 5000 besteht aus dem Probenahmesystem Dräger DrugTest 5000 Test-Kit und dem Analysegerät Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Damit haben Sie alles zur Hand, wenn Sie vor Ort erste Gewissheit brauchen.

### DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST-KIT: SPEICHELPROBEN EINFACH UND SCHNELL NEHMEN

#### Bei Bedarf sofort einsatzbereit

Mit dem Test-Kit haben Sie ein gebrauchsfertiges Probenahmesystem zur Hand. Sie wollen eine verdächtige Person überprüfen? Entfernen Sie einfach die Schutzkappe und geben Sie die Testkassette an den Probanden weiter.

#### Hygienisch und schmerzlos: Sammeln ohne Blutabnehmen

Der Proband streicht mit dem Probennehmer eine bis vier Minuten lang zwischen Wange und Zahnfleisch hin und her. Danach gibt er Ihnen die Testkassette wieder zurück – ohne dass Sie mit der Speichelprobe in Berührung kommen.

#### Blau heißt: Probenahme zu Ende

Das Ende der Probenahme wird automatisch angezeigt: Hat der Probennehmer genug Speichel aufgenommen, färbt sich die integrierte Anzeige blau. Danach schieben Sie Testkassette und Patrone zur Auswertung direkt in den Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

### WEITERE VORTEILE DES DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST-KITS:

- einfach zu handhaben – mit und ohne Handschuhe
- für Links- und Rechtshänder geeignet
- extrem niedrige Nachweisgrenze für THC als Hauptwirkstoff von Cannabis
- verschiedene Konfigurationen erhältlich (je nach Ausführung mehrere Substanzen gleichzeitig nachweisbar)
- lagerbeständig in der Originalverpackung bei bis zu 30 °C
- Einsatz bei Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C möglich



Dräger DrugTest 5000 –  
Probe sammeln und sofort analysieren



Das Dräger DrugTest® 5000 Test Kit:  
unkompliziert, schnell, zuverlässig und  
sicher im Test auf Drogen.

## DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER



### DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER: PROBEN SOFORT AUTOMATISCH AUS- WERTEN LASSEN

#### Testkassette und Patrone einstecken, starten, fertig

Die Speichelprobe kann unmittelbar nach der Probenahme ausgewertet werden. Sie schieben Testkassette und Patrone einfach in den Analyzer – und schon startet die Auswertung.

#### Einfach und sicher zu bedienen – auch unter widrigen Bedingungen

Selbst wenn es hektisch wird: Mit nur drei Tasten haben Sie das Analysegerät im Griff. Die Bedienung ist menügeführt. Befolgen Sie einfach die Klartext-Anweisungen.

#### Schnell und bequem: Ergebnisse in nur wenigen Minuten

Haben Sie das Gerät in Betrieb genommen, läuft die Analyse ganz von selbst. So bleiben Ihnen Kopf und Hände frei, um sich beispielsweise um Ihren Probanden zu kümmern. Das Ergebnis wird Ihnen nach wenigen Minuten automatisch angezeigt.

#### Leicht ablesbares Farbdisplay

Das Farbdisplay ist beleuchtet. So behalten Sie selbst bei schlechten Sichtverhältnissen den Überblick. Auch aus einiger Entfernung oder aus einem schrägen Blickwinkel lässt sich der Anzeigetext problemlos ablesen.

#### Eindeutige Messergebnisse ohne Interpretationsspielraum

Auch das Messergebnis erscheint in vollständigen Sätzen. Fehlinterpretationen sind damit so gut wie ausgeschlossen.



D-2087-2011

Dräger Drugtest 5000 und Zubehör in Tragetasche



ST-8404-2006

Dräger Mobile Printer



ST-3481-2003

Kompaktastatur



ST-13211-2007

Transportkoffer

### Proben auswerten, wo immer es die Situation verlangt

Das Analysegerät wird mit fest verbauten, wieder aufladbaren Batterien betrieben. So sind Sie unabhängig von externer Stromversorgung und können die Analyse überall sofort starten.

### 500 Messergebnisse speichern und mühelos verwalten

Im Analyzer ist ein Speicher integriert. Er fasst die letzten 500 Messergebnisse inklusive Datum und Uhrzeit. Über eine Tastatur oder ein Barcode-Lesegerät können Sie weitere Details zur Messung eingeben. Die Ergebnisse lassen sich mit dem Dräger Mobile Printer direkt vor Ort ausdrucken. Um die Daten zu dokumen-

tieren, können Sie diese über USB auf den PC übertragen.

### 4,5 kg leicht für den Transport

Der Analyzer fällt beim Einsatz kaum ins Gewicht. Sie können ihn leicht mitnehmen. Um das Gerät plus Zubehör einfach und sicher zu transportieren, erhalten Sie bei Dräger optional beispielsweise die passende Tragetasche oder einen robusten Transportkoffer.

### WEITERE VORTEILE DES DRÄGER DRUGTEST® 5000 ANALYZER:


- integrierte Selbsttestfunktion: keine halbjährliche Kalibrierung notwendig
- zahlreiches Zubehör (z. B. Systemtasche, Ladenetzteil oder Kompaktastatur)

### DIESE RAUSCHMITTEL UND MEDIKAMENTE LASSEN SICH MIT DEM DRÄGER DRUGTEST® 5000 ZUM BEISPIEL NACHWEISEN:

- Amphetamin
- Benzodiazepine
- Delta-9-Tetrahydrocannabinol
- Kokain
- Methamphetamine
- Opiate
- Methadon


## DRÄGER DRUGTEST® 5000

ST-319-2008

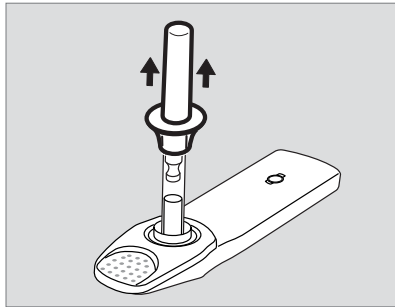


- Schutzkappe entfernen.
- Testkassette an Probanden weitergeben.

D-4780-2011

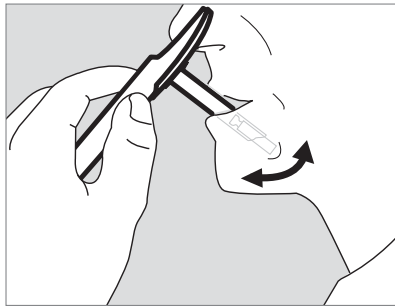

- Proband bewegt den Probenehmer im Mund hin und her, bis sich die Anzeige blau färbt.

D-4779-2011

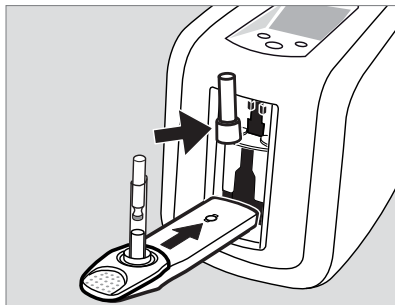

- Testkassette und Patrone in den Analyzer schieben. Die Analyse startet automatisch.
- Nach wenigen Minuten wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.

## DRÄGER DRUGTEST® 5000 TEST-KITS



**Dräger SSK 5000:  
Drogen auf Oberflächen oder in  
Substanzen nachweisen**

Sie möchten an Ort und Stelle eine Probe beispielsweise von einem Lenkrad oder Geldschein auswerten? Nehmen Sie die Probe mit dem Probensammler Dräger SSK 5000 und übertragen Sie diese einfach auf den Probenehmer des Dräger DrugTest 5000 Test-Kits. Dann können Sie die Probe vom Dräger DrugTest 5000 Analyzer untersuchen lassen.

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 V Gleichspannung (über mitgeliefertes Netzteil)
Stromaufnahme	üblicherweise 3 A
Abmessungen (B*H*T)	200 * 260 * 250 mm
Gewicht	4,5 kg
Arbeitsbereich	Betrieb: 4 °C bis 40 °C Lagerung/Transport: -20 °C bis +60 °C relative Feuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Schnittstellen	optisch für Drucker, PS/2, USB Slave
Dauer einer Messung	abhängig vom verwendeten Test-Kit (typisch < 9 Minuten)
Speicherkapazität	500 Datensätze oder Messungen

## BESTELLINFORMATIONEN

	Packungseinheit	Bestell-Nr.
Dräger DrugTest 5000 Analyzer	1 Analysegerät inkl. Netzteil	83 19 900
Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*	20 Stück	83 19 830
Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MTD*	20 Stück	83 20 930
Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI-THC-AMP-MAMP*	20 Stück	83 21 280
Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI*	20 Stück	83 19 990
Dräger DrugTest 5000 Test-Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*	20 Stück	83 22 388
Dräger SSK 5000	20 Stück	83 20 490
Kompaktastatur, deutsche Tastenbelegung („QWERTZ“)	1	83 15 095
Kompaktastatur, englische Tastenbelegung („QWERTY“)	1	83 15 497
Kompaktastatur, französische Tastenbelegung („AZERTY“)	1	83 15 142
Barcode-Lesegerät	1	AG 02 491
Dräger Mobile Printer	1	83 19 310
Tragetasche für DrugTest 5000 Analyzer	1	83 19 960
Bereitschaftstasche für DrugTest 5000 Analyzer und Zubehör	1	83 22 675
Transportkoffer für DrugTest 5000 Analyzer	1	83 19 925
12V-Kabel zur Verbindung mit 12V-Bordsteckdose	1	83 12 166

\*COC: Kokain – \*OPI: Opiate – \*BENZO: Benzodiazepine – \*THC: Cannabis – \*AMP: Amphetamin – \*MAMP: Methamphetamine – \*MTD: Methadon

### HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### NIEDERLASSUNGEN

#### REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-0  
Fax 040 668 67-150  
[vertrieb.nord@draeger.com](mailto:vertrieb.nord@draeger.com)

#### REGION OST

An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 35 0 31-0  
Fax 0341 35 0 31-161  
[vertrieb.ost@draeger.com](mailto:vertrieb.ost@draeger.com)

#### REGION SÜD

Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-0  
Fax 0711 721 99-50  
[vertrieb.sued@draeger.com](mailto:vertrieb.sued@draeger.com)

### REGION WEST

Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-0  
Fax 02151 37 35-50  
[vertrieb.west@draeger.com](mailto:vertrieb.west@draeger.com)

### DRÄGER SERVICE

#### REGION NORD

Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-161  
Fax 040 668 67-155  
[service.nord@draeger.com](mailto:service.nord@draeger.com)

#### REGION OST

An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 35 0 31-164  
Fax 0341 35 0 31-166  
[service.ost@draeger.com](mailto:service.ost@draeger.com)

### REGION SÜD

Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-43  
Fax 0711 721 99-51  
[service.sued@draeger.com](mailto:service.sued@draeger.com)

#### REGION WEST

Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-16  
Fax 02151 37 35-29  
[service.westkr@draeger.com](mailto:service.westkr@draeger.com)

#### REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A  
65205 Wiesbaden  
Tel 06122 95 65-70  
Fax 06122 95 65-77  
[service.westwi@draeger.com](mailto:service.westwi@draeger.com)

### TOCHTERGESELLSCHAFTEN

#### ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria  
Ges.m.b.H  
Wallackgasse 8  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.safety@draeger.com](mailto:office.safety@draeger.com)

#### SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG  
Aegertweg 7  
8305 Dietlikon  
Tel +41 44 805 82-82  
Fax +41 44 805 82-80  
[info.ch.sd@draeger.com](mailto:info.ch.sd@draeger.com)